

Preciform® N light superhydro

Super hydrophiles, leichtfließendes Vinyl-Silikon Abformmaterial



Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

Produktbeschreibung

Preciform® N light superhydro ist ein super hydrophiles leichtfließendes Korrekturabformmaterial, besonders geeignet für die Korrekturtechnik (2-zeitig/2-phasig).

Preciform® N light superhydro ist ein Präzisionsabformmaterial auf der Basis von additionsvernetzenden Vinyl-Silikon. Geliefert in AUTOMIX-Kartuschen kann es direkt und blasenfrei auf den Zahn oder auf den Abformlöffel appliziert werden.

Preciform® N light superhydro ist thixotrop, d.h. es bleibt in seiner Position auf dem Abformlöffel stehen, unter Druck aber fließt es leicht. Das Produkt zeigt im besonderen Maße hydrophile Eigenschaften und führt daher zu optimaler Benetzbarkeit und genauer Wiedergabe der subgingivalen Bereiche oder anderer feuchter Oberflächen.

Preciform® N light superhydro erfüllt die Anforderungen der **DIN EN ISO 4823, Typ 3 (leichtfließend)**.

Indikationen/Zweckbestimmung

- Korrekturtechnik (2-zeitig/2-phasig) z. B. mit Preciform® N AV-Putty superhydro
- Doppelmischtechnik (1-zeitig/2-phasig)

Leistungsmerkmale

Die Leistungsmerkmale des Produktes entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung.

Kontraindikationen

Keine bekannt.

Patientenzielgruppe

Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesehener Anwender

Die Anwendung des Medizinproduktes erfolgt durch den professionell in der Zahnmedizin ausgebildeten Anwender.

Vorbereiten der AUTOMIX-Kartusche

Den Verschluss der AUTOMIX-Kartusche entfernen und durch eine der mitgelieferten Mischkanülen ersetzen. Das zugehörige Austragegerät wird sodann mit der AUTOMIX-Kartusche bestückt und ist sofort applikationsbereit.

Anmerkung:

Die gebrauchte Mischkanüle dient bis zur nächsten Applikation als Verschluss. **Die Kartusche nicht wieder mit dem Originalverschluss versehen**, da hierbei eine gegenseitige Kontamination und somit unbeabsichtigtes teilweises Aushärten nicht ausgeschlossen werden kann.

Abformung

Preciform® N light superhydro schnellhärtend:

Korrekturtechnik

Die Vorabformung mit Abflusssrillen versehen. Preciform® N light superhydro schnellhärtend direkt aus der Mischkanüle auf den mit dem Vorabformmaterial beschickten Abformlöffel aufbringen und/oder direkt um den Zahn applizieren. Den Abformlöffel nicht später als **1:30 Minuten** ab Mischbeginn (Verarbeitungszeit bei 23 °C) im Mund positionieren und mindestens **2:00 Minuten** im Mund belassen.

Doppelmischtechnik

Den Abformlöffel mit dem Vorabformmaterial beschicken und die Präparation mit Preciform® N light superhydro schnellhärtend umspritzen. Dabei so beginnen, dass das Umspritzen der Präparation und das Befüllen des Löffels zeitgleich beendet sind.

Den Abformlöffel nicht später als **1:00 Minuten** ab Mischbeginn (Verarbeitungszeit bei 23 °C) im Mund positionieren und mindestens **2:00 Minuten** im Mund belassen.

Preciform® N light superhydro normalhärtend:

Korrekturtechnik

Die Vorabformung mit Abflusssrillen versehen. Preciform® N light superhydro normalhärtend direkt aus der Mischkanüle auf den mit dem Vorabformmaterial beschickten Abformlöffel aufbringen und/oder direkt um den Zahn applizieren. Den Abformlöffel nicht später als **2:00 Minuten** ab Mischbeginn (Verarbeitungszeit bei 23 °C) im Mund positionieren und mindestens **3:00 Minuten** im Mund belassen.

Doppelmischtechnik

Den Abformlöffel mit dem Vorabformmaterial beschicken und die Präparation mit Preciform® N light superhydro normalhärtend umspritzen. Dabei so beginnen, dass das Umspritzen der Präparation und das Befüllen des Löffels zeitgleich beendet sind.

Den Abformlöffel nicht später als **1:30 Minuten** ab Mischbeginn (Verarbeitungszeit bei 23 °C) im Mund positionieren und mindestens **3:00 Minuten** im Mund belassen.

Die Abformung soll bei normaler Raumtemperatur aufbewahrt werden (max. 25 °C).

Ausgießen

Die Abformung kann **30 Minuten** nach der Entfernung aus dem Mund ausgegossen werden. Es gibt keine weitere zeitliche Begrenzung.

Galvanisieren

Alle Abformungen können kupfer- oder silbergalvanisiert werden.

Desinfektion

Die Abformungen können mit Desinfektionslösungen speziell für Abformmaterialien auf Basis additionsvernetzender Silikone desinfiziert werden, z. B. Mucalgin®.

Hierzu die Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten.

Lagerung

Nicht über 25 °C lagern! Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden!

Zusätzliche Hinweise:

- Nicht mit Standard (Kondensations-Reaktions-Typ) Silikonabformmaterialien verwenden!
- Verwenden Sie keine latex- oder schwefelhaltigen Handschuhe, da diese durch Kontamination die Abbindereaktion der Polyvinyle beeinträchtigen können.
- Bei der Doppelmischtechnik (1-zeitig/2-phasig) ist darauf zu achten, dass beide Materialien die gleiche Mundverweildauer haben. Die Verarbeitungszeit wird durch das Material mit der kürzeren Verarbeitungszeit bestimmt.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Entsorgung

Entsorgung gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.

Meldepflicht

Schwerwiegende Vorkommnisse gemäß EU Medizinprodukte Verordnung die im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt aufgetreten sind, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Garantie

P. L. Superior Dental Materials GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. P. L. Superior Dental Materials GmbH übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Veräußerlichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von P. L. Superior Dental Materials GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des P. L. Superior Dental Materials GmbH-Produktes.

Haftungsbeschränkung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für P. L. Superior Dental Materials GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

Liefereinheiten

- | | |
|--|---------|
| • 2 Sicherheitskartuschen à 50 ml Korrekturmasse NH,
12 Mischkanülen 5.4 (pink) | 1060419 |
| • 2 Sicherheitskartuschen à 50 ml Korrekturmasse SH,
12 Mischkanülen 5.4 (pink) | 1060431 |

REF



Merz Dental GmbH


Kieferweg 1, 24321 Lütjensburg, Germany

Tel + 49 (0) 4381 / 403-0

Fax + 49 (0) 4381 / 403-403

www.merz-dental.de

EN ISO 13485

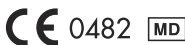

**P. L. Superior
Dental Materials GmbH**

Stiller Weg 15 A

22607 Hamburg, Germany