



Wax Spacer

► brevettato da:
Prof. Dr. Dr. Arnim Godt & Odt. Daniel Schweizer

in esclusiva per MERZ DENTAL

Wax Spacer

Set-up diagnostico intraorale per la registrazione neurocentrica.

Wax Spacer è una cera di masticazione fisiologica per determinare altezze occlusali predefinite. Permette di registrare precisamente l'esatta posizione della mandibola rispetto al mascellare superiore. L'inserto (Spacer), resistente al morso, incorporato nel vallo in cera, garantisce, già nella definizione della relazione mascellare, la registrazione del rialzo occlusale desiderato ed una distanza interocclusale costante. È il paziente stesso a stabilire la situazione della relazione trasversale e sagittale delle due arcate all'altezza occlusale prevista.

Indicazioni /Campi d'applicazione


- Placche d'occlusione
- Masticoni occlusali adattati
- Placche per il rialzo della masticazione
- Utilizzo nella medicina del sonno
- Apparecchi ortodontici

Durante la registrazione di arcate mascellari dotate di denti naturali o protesizzate, lo Spacer fa in modo che il paziente non riesca a serrare i denti in posizione di chiusura abituale, ma solo fino allo stop inserito (Spacer). Si esclude così un contatto tra le cuspidi.


Caratteristiche & Vantaggi

- Altezza occlusale definita
- Semplicità di utilizzo
- Risultati costanti
- Posizione definita della mandibola
- Controllo visivo della profondità del morso per mezzo del cambiamento di colore

I precontatti vengono esclusi con lo Spacer. In questo modo si determina il rapporto cuspid-fossa tenendo conto del complesso discocondilare mantenendo l'altezza definita.

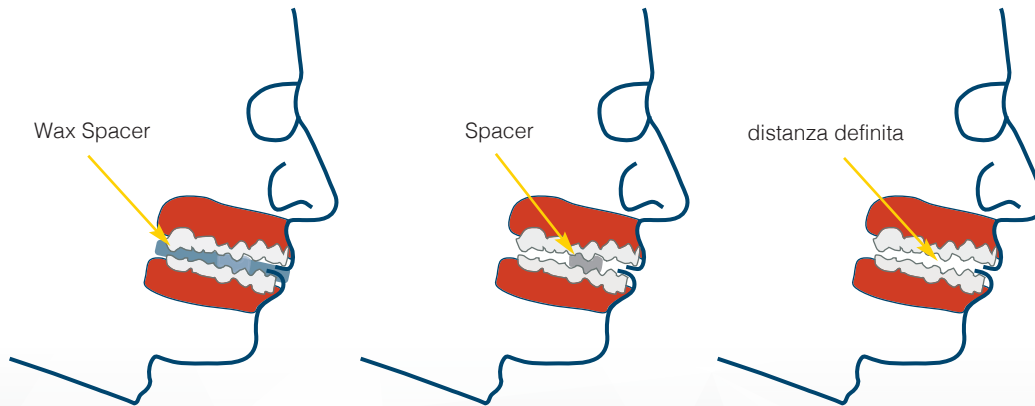


Wax Spacer

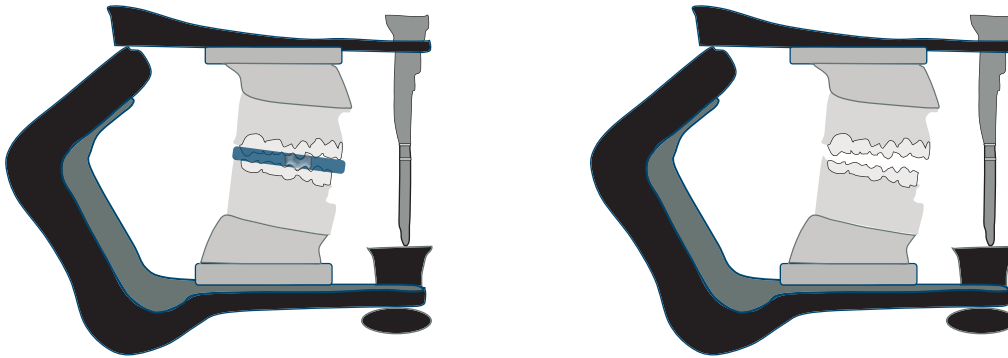


Wax Spacer secondo il Prof. Godt & l'Odt. Schweizer

- Cera di masticazione fisiologica per la terapia delle placche, medicina del sonno e ortodonzia per determinare la distanza interocclusale con un'altezza occlusale definita (1 mm, 2 mm, 3 mm).
- Con Wax Spacer si stabilisce un rialzo di masticazione definito senza dover eseguire la complicata misurazione della rotazione dell'articolazione mascellare.


Posizione dell'inserto resistente al morso (Spacer)

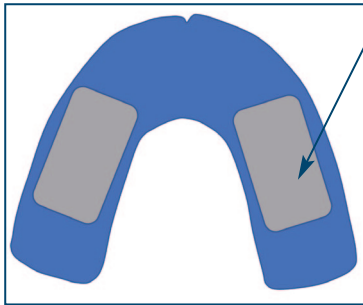

Blu scuro 1 mm

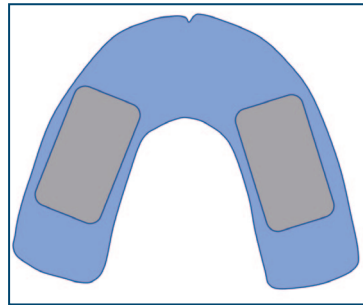

Blu medio 2 mm

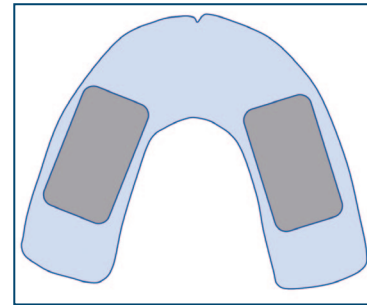

Azzurro 3 mm

- L'inserto (Spacer), resistente al morso, incorporato nel vallo in cera, garantisce, quando si serrano i denti, una distanza interocclusale costante.

Wax Spacer

- Wax Spacer è disponibile in diversi spessori (codificati cromaticamente) per altezze diverse. In questo modo si può garantire un esatto posizionamento della mandibola nella posizione terapeutica da raggiungere.
- Wax Spacer è una cera di masticazione fisiologica affidabile per registrare la posizione dell'articolazione mascellare, con distanze differenti tra le due arcate.

Confezioni

REF

- | | | |
|--------|--|---------|
| ■ 1 mm | 20 x  | 1030230 |
| ■ 2 mm | 20 x  | 1030231 |
| ■ 3 mm | 20 x  | 1030232 |



Wax Spacer

Merz Dental GmbH Kieferweg 1 24321 Lütjenburg, Germany Tel +49 (0) 4381 / 403-0 info@merz-dental.de

www.merz-dental.de

1092444/2020-11/it

Merz Dental è certificata ai sensi della norma EN ISO 13485 e offre così la sicurezza e i vantaggi di un sistema di gestione della qualità orientato al futuro
Salvo errori e refusi.